



Manual de Instalación de ENCLAII Escritorio



Versión del Manual: 1.0

Elaborado por el equipo de desarrollo de ENCLAII

Fecha: Julio 2026



Introducción

El presente manual de usuario tiene como finalidad orientar en el uso de **ENCLAII – Endoscopy Capture**, una aplicación de escritorio diseñada para apoyar la captura de imágenes y videos durante la realización de estudios endoscópicos.

La aplicación se encuentra vinculada con la plataforma web de ENCLAII. Para acceder a ella, el usuario primero deberá registrarse en el sitio web oficial (<https://sistema.enclaii.com/>) y posteriormente utilizar sus credenciales para iniciar sesión en la aplicación de escritorio.

ENCLAII – Endoscopy Capture conserva diversas funciones disponibles en la plataforma web; sin embargo, incorpora un proceso específico para la creación de nuevos estudios. Este proceso permite vincular la aplicación con el estudio y el paciente correspondiente mediante un código de seis dígitos, detectar un dispositivo de captura conectado por USB, visualizar el procedimiento en tiempo real, tomar fotografías, grabar videos y almacenar el material obtenido.

Objetivo del Manual

El objetivo de este manual es proporcionar al usuario una guía clara y ordenada para el manejo de **ENCLAII – Endoscopy Capture**, desde el inicio de sesión y la vinculación del dispositivo hasta la captura y consulta de las imágenes y videos obtenidos durante un estudio.

Asimismo, busca facilitar la comprensión de las herramientas disponibles, prevenir errores durante su utilización y contribuir al registro adecuado de la información correspondiente a cada paciente.

Requisitos para utilizar la aplicación

Para utilizar correctamente **ENCLAII – Endoscopy Capture**, se requiere lo siguiente:

Windows

- Windows 10 u 11 de 64 bits
- Procesador Intel Core i5 o superior
- 8 GB de RAM recomendado



- 20 MB libres para descargar el instalador
- Puerto USB 3.0 o superior
- Conexión a internet para sincronización

macOS

- Soporte en preparación
- Compatible con Intel y Apple Silicon
- 8 GB de RAM recomendado
- Conexión a internet para sincronización

Descarga de la aplicación

Pasos para descargar la aplicación:

1. Primero debes ingresar al sitio web <https://sistema.enclaii.com/>, ir a configuración y dar clic en “Aplicación de Escritorio”.

Es necesario verificar que tu dispositivo tenga los requisitos necesarios para instalar la aplicación.

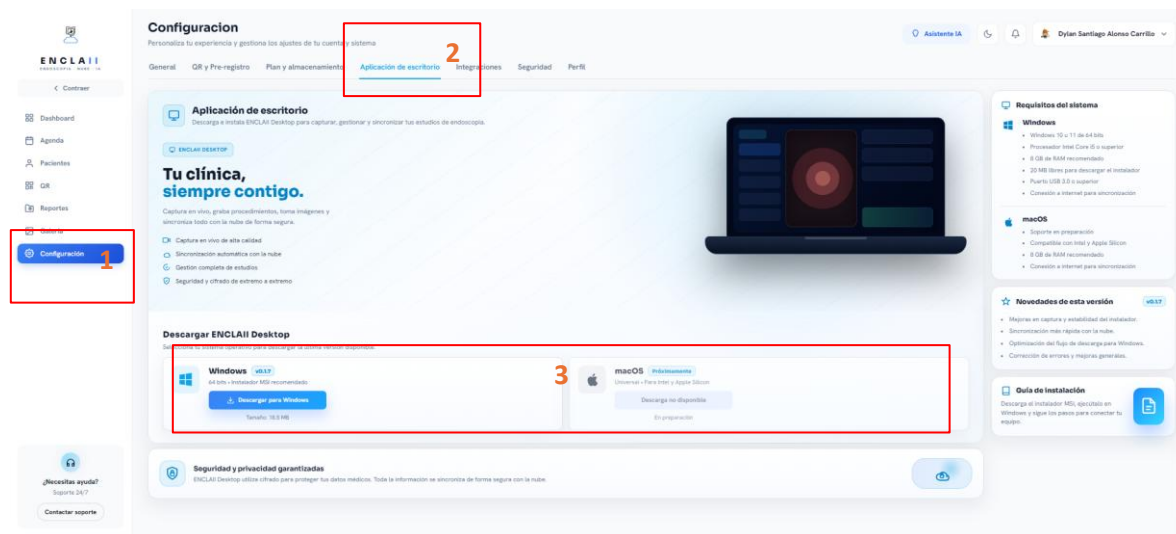


Ilustración 1 Configuración de Sitio Web

2. Verifica la descarga correcta y ábrimos.

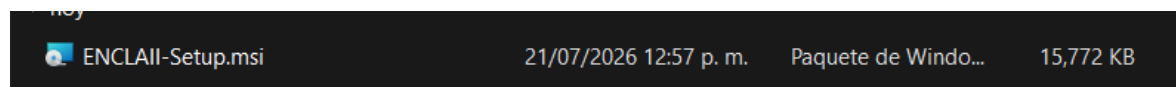


Ilustración 2 Descarga correcta



3. En esta ventana se informa que el programa será instalado en el equipo. Para comenzar el proceso, el usuario deberá hacer clic en el botón “**Siguiente**”. Si no desea continuar, puede seleccionar “**Cancelar**” para cerrar el asistente.

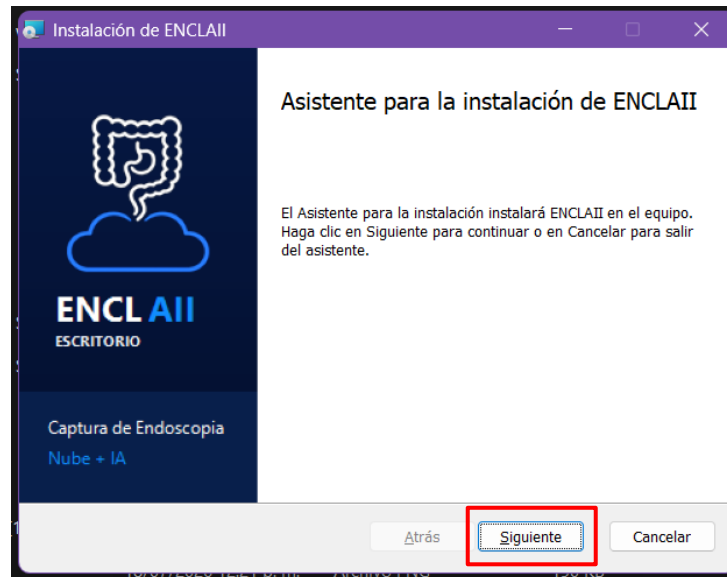


Ilustración 3

4. Esta pantalla presenta los **Términos y Condiciones de Uso y el Aviso de Privacidad de ENCLAI**. El usuario deberá leer el contenido y marcar la casilla “**Acepto los términos y el aviso de privacidad**” para habilitar el botón “**Siguiente**” y continuar con la instalación. También podrá seleccionar “**Imprimir**” para obtener una copia del documento.

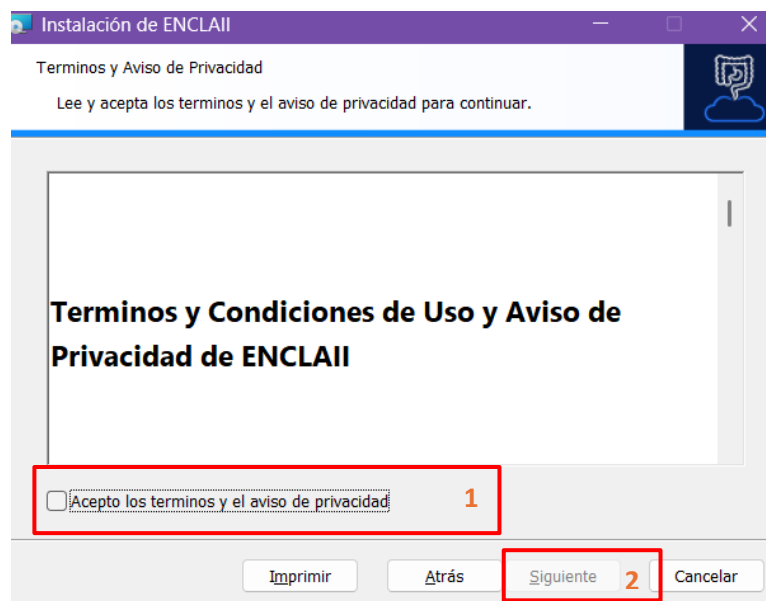


Ilustración 4



5. En esta pantalla se muestra la carpeta de destino en la que se instalará ENCLAI. Se recomienda conservar la ubicación predeterminada “C:\Program Files\ENCLAI” y hacer clic en “**Siguiente**”. Si se desea utilizar otra ubicación, deberá seleccionarse el botón “**Cambiar...**” y elegir una carpeta diferente.

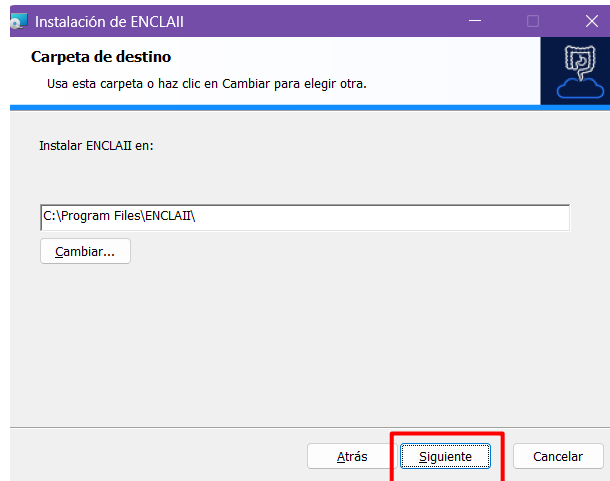


Ilustración 5

6. Esta pantalla indica que la configuración ha finalizado y que ENCLAI está listo para instalarse. Para comenzar, el usuario deberá hacer clic en “**Instalar**”. Es posible que Windows solicite autorización para realizar cambios en el equipo; en ese caso, deberá confirmarla. También se puede seleccionar “**Atrás**” para revisar la configuración o “**Cancelar**” para salir del asistente.

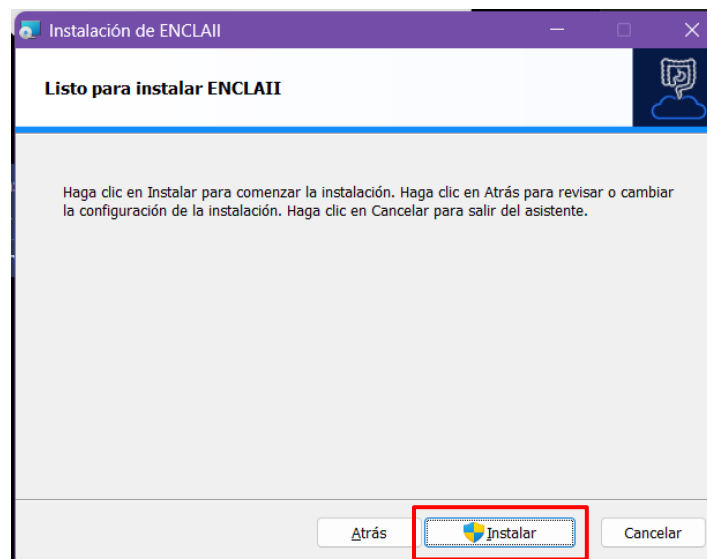


Ilustración 6



7. Esta pantalla confirma que la instalación de ENCLAI se completó correctamente. La casilla “**Iniciar ENCLAI**” permite abrir la aplicación automáticamente al cerrar el asistente. Para concluir el proceso, el usuario deberá hacer clic en el botón “**Finalizar**”.

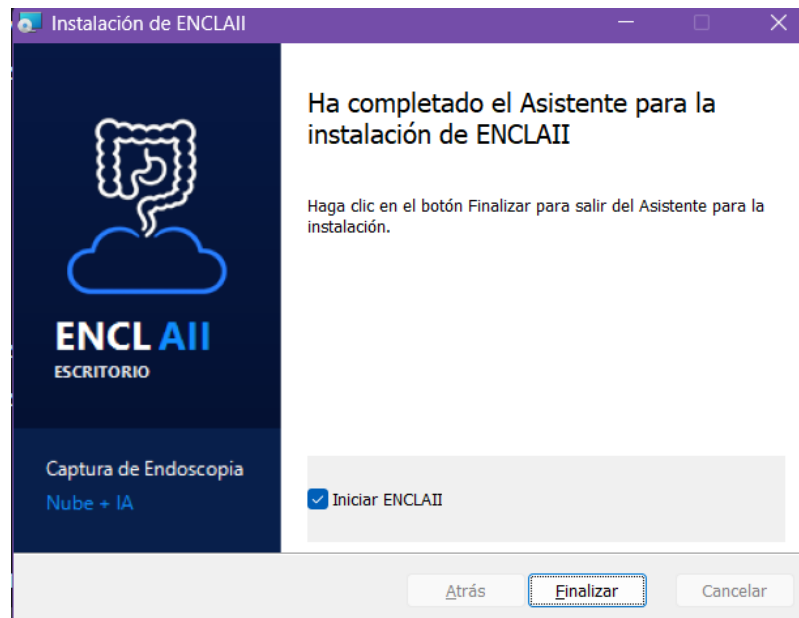


Ilustración 7

8. Abre automáticamente la aplicación de ENCLAI

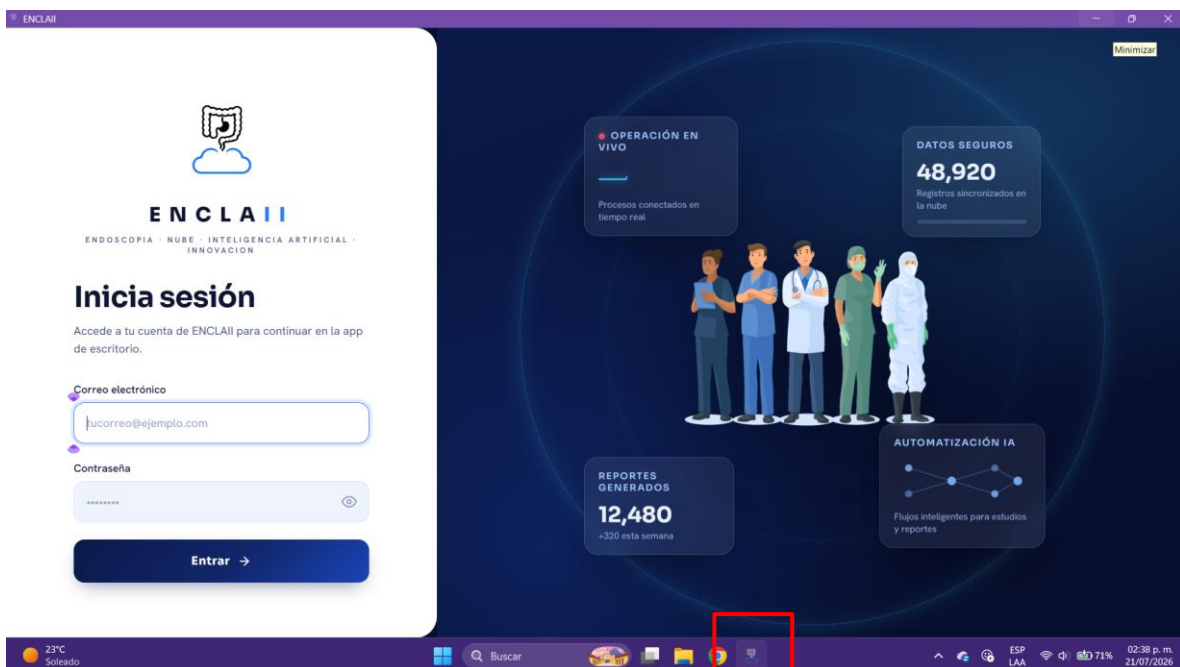


Ilustración 8



Sino abre automáticamente busca la aplicación “ENCLAI”

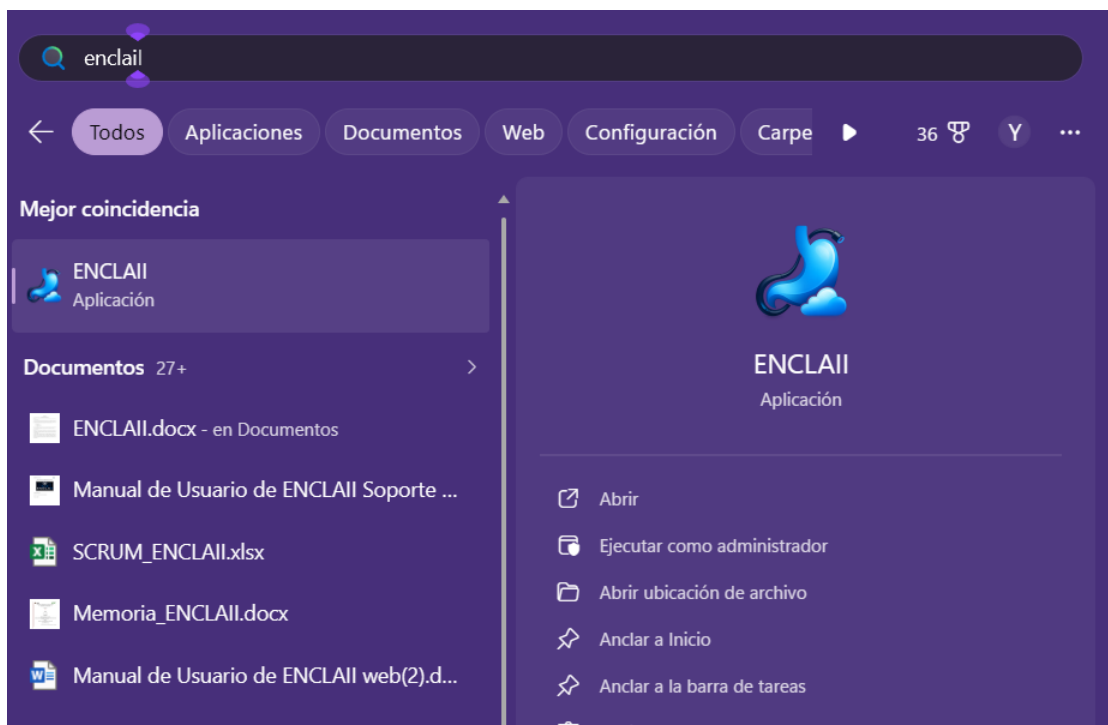


Ilustración 9

